


ニッケルフィルター

●ニッケルフィルター取扱注意事項●

ご使用時の注意事項

ニッケルフィルターは、変形しやすい部品です。
重い物を上に乗せたり、衝撃を与えない
よう注意してください。

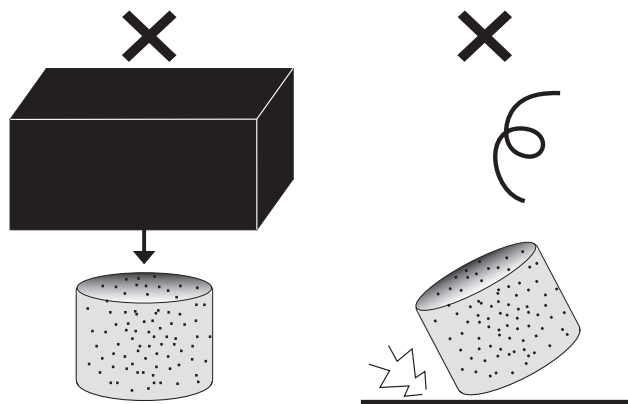

交換時期の目安

下記の項目を目安に、交換をお願い致します。

- 1、破損、変形したら
- 2、汚れ、異物がフィルター内部に固着して吸込みが悪くなったら
- 3、消耗（フィルターが痩せてきたら）

清掃方法

使用後一日一回は、洗剤(※1)を入れたお湯、または水に一晩つけ置きし、その後、洗剤を洗い流して水気をよく切り、布等で軽く水分を拭き取って下さい。

注意1: スポンジやブラシで表面をこすると、
フィルターの目がつぶれてしまいますので、
こすらないようにして下さい。

注意2: ニッケルフィルター以外の他の部品や備品と
一緒につけ置きしないでください。
変色し、性能が落ちる恐れがあります。

(※1) 洗剤は弊社商品の「クリーンです」がお勧めです。

「クリーンです」の特徴

- ・無色透明アルカリ性洗剤で、洗浄剤につけておくだけで、こびりついた汚れを落とすことができます。
- ・くり返し使用できるので経済的!



※詳細は最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせ下さい。